


ChFN System 2[®]

TROCANTÉRICO

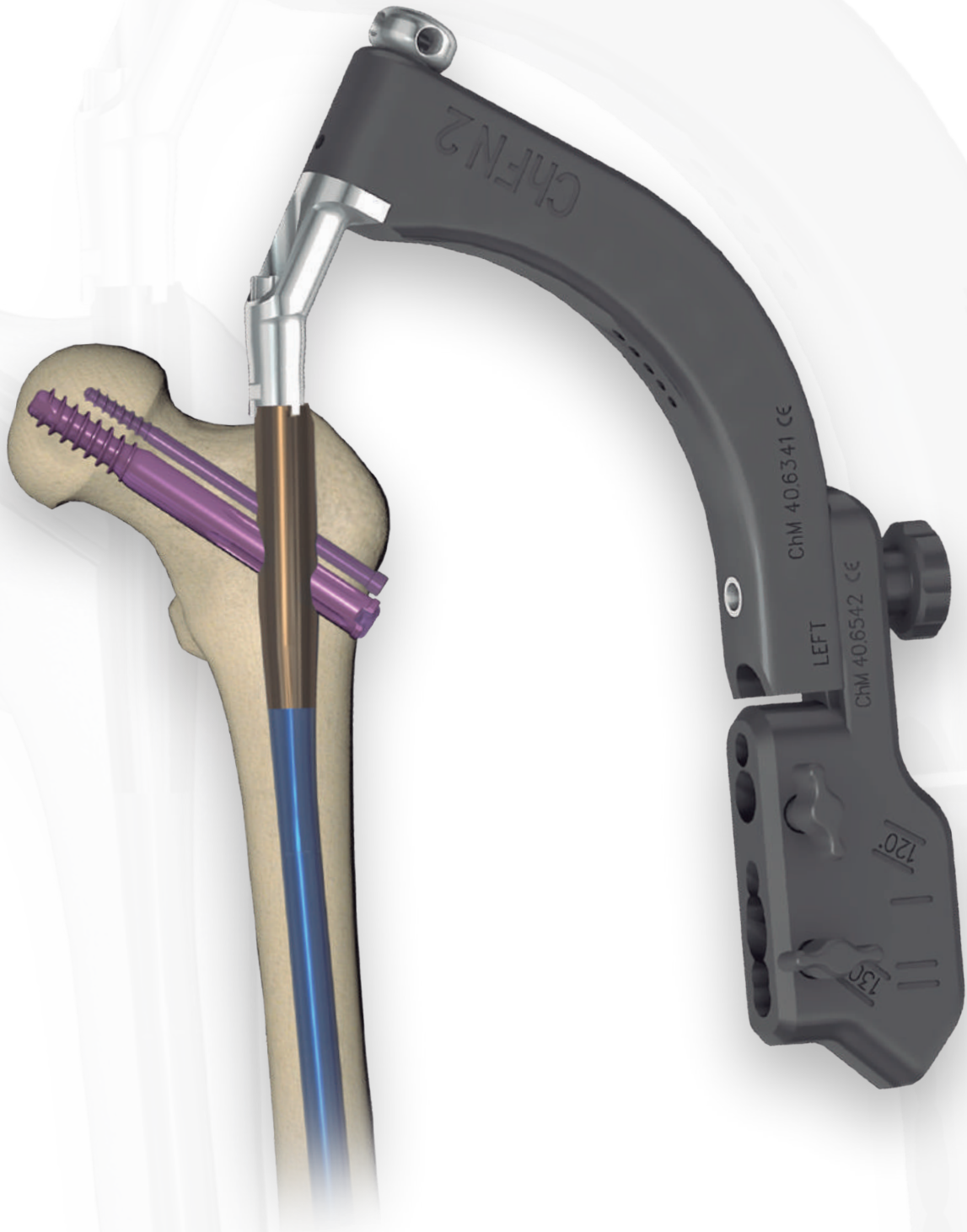

ChM[®]

Indicaciones



Fracturas pertrocantericas
tipo **31-A1,A2,A3**



Fracturas subcapitales
tipo **31-B1, B2**




Fracturas trocantéricas / diafisarias
tipo **32-A1,A2,A3**


Clasificación Tipo AO

ChFA System 2[®]
TROCANTERICO



Características del Sistema

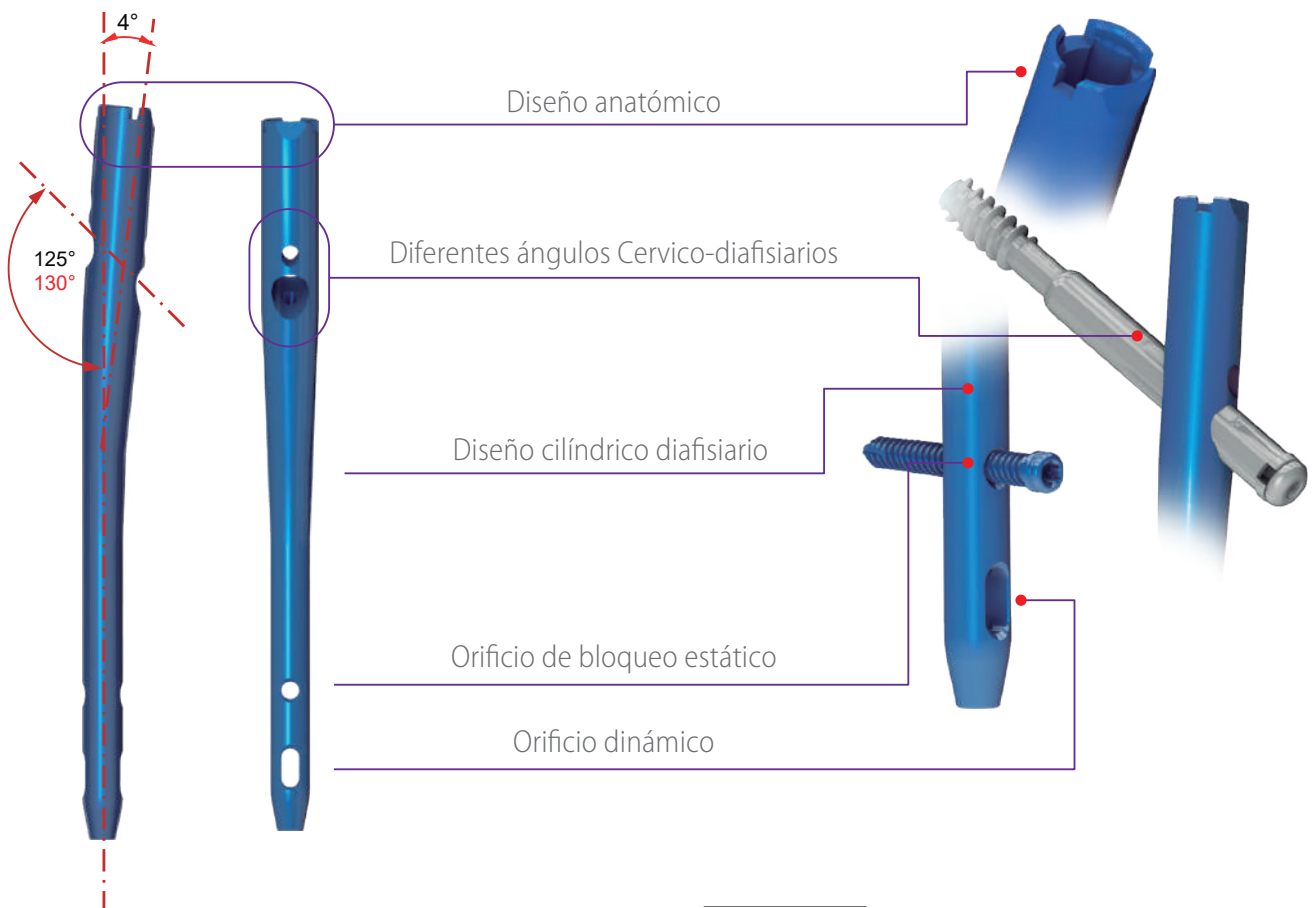


Descripción

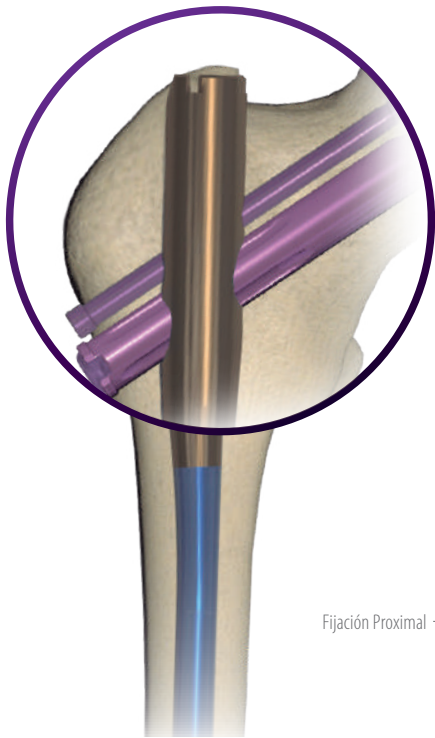

Material:	Aleación de titanio (Ti6Al7Nb)
Diámetro proximal:	16 mm
Diámetro diafisiario:	10 - 11mm
Longitud:	180 mm /320 mm - 400 mm
Versión:	Canulado
Color:	Codificación de acuerdo a diámetro

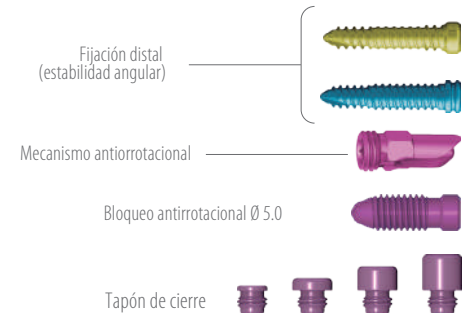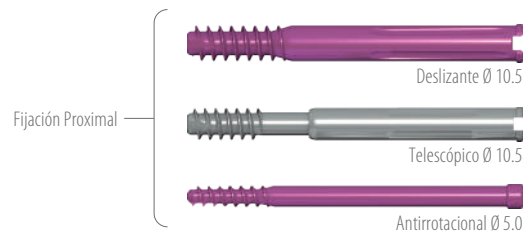

Opciones de fijación

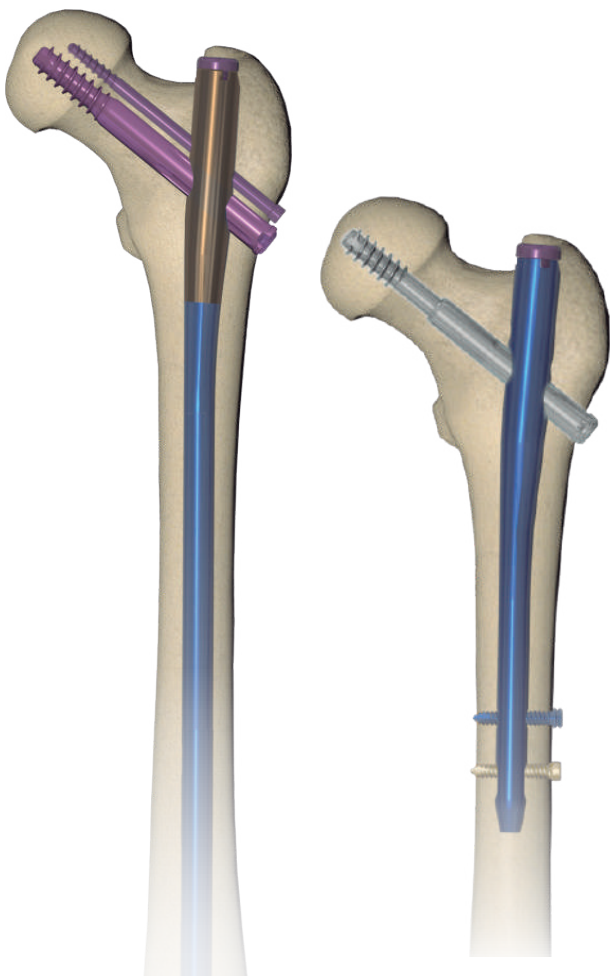

Estático / Dinámico

Antirrotatorio

Autocolapsable

Estático: Fija el tornillo deslizante una vez alcanzada la compresión requerida, en el foco de la fractura.


Dinámico: Permite que el tornillo deslizante tenga desplazamiento axial sin posibilidad de rotación.

Autocolapsable: Sistema mecánico autocolapsable sin restroceso en la cortical lateral.

ChFN System 2[®]

TROCANTÉRICO

Promed
Quirúrgicos

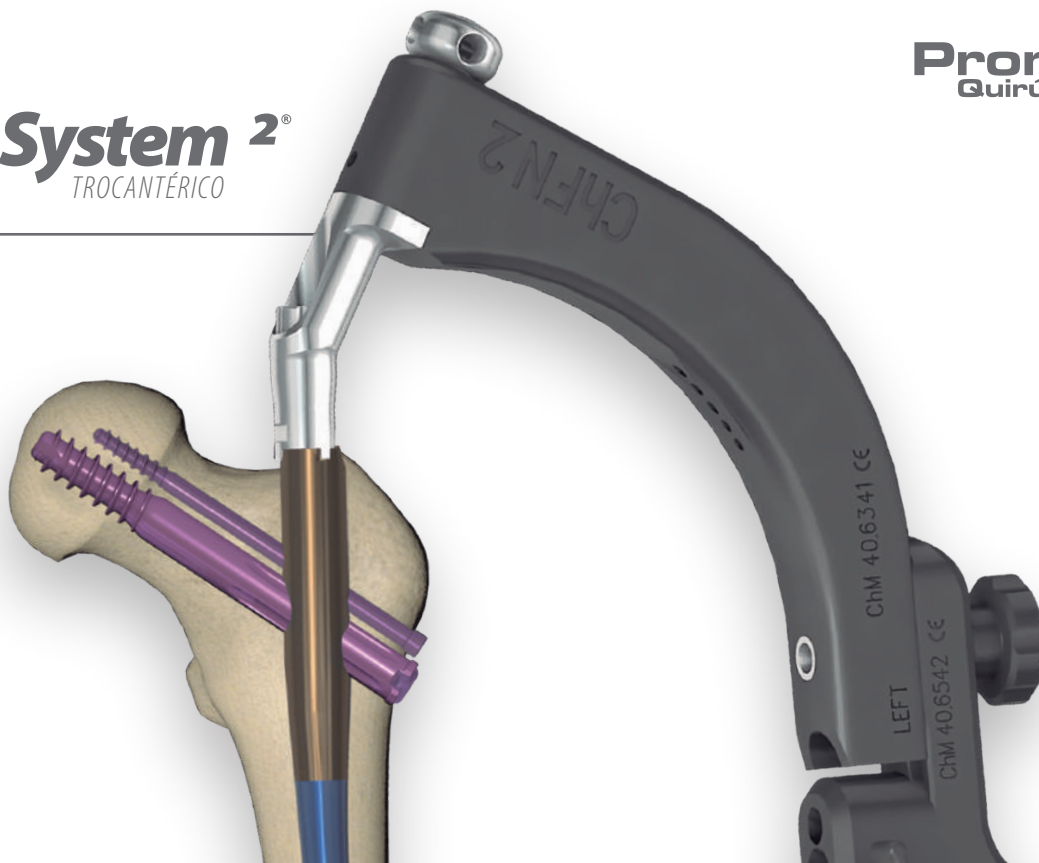

BOGOTÁ D.C

☎ Teléfono: +57 (1) 221 45 99
📱 Móvil: + (57) 315 300 72 94
📍 Almacén: + (57) 316 442 25 81
📍 Dirección: Cra 67 # 43 - 17 Br. Salitre Greco



BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)

☎ Teléfono: + 57 (5) 312 51 93
📱 Móvil: + (57) 318 593 21 64
📍 Dirección: Cra 44 No. 84 - 91 Br. Granadillo



BUCARAMANGA (SANTANDER)

☎ Teléfono: + 57 (7) 696 09 71
📱 Móvil: + (57) 318 868 47 99
📍 Dirección: Cra 38 No. 34 - 79 Br. Las Américas



CALI (VALLE DEL CAUCA)

☎ Teléfono: + 57 (2) 577 06 43 · + 57 (2) 373 24 24
📱 Móvil: + (57) 318 358 89 40
📍 Dirección: Cra 38 # 5b5 - 89 Br. San Fernando



CARTAGENA (BOLIVAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 643 06 75
📱 Móvil: + (57) 317 423 21 48
📍 Dirección: Br. Contadora 1 - Casa 26



IBAGUÉ (TOLIMA)

📱 Móvil: + (57) 317 403 59 97
📍 Dirección: Calle 51 #7b - 17
Br. Limonar 5 sector



MEDELLIN (ANTIOQUIA)

📱 Móvil: + (57) 317 515 16 89
📍 Dirección: Calle 16 # 41 - 210 Oficina 105
Edif. La Compañía



VALLEDUPAR (CESAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 571 24 88
📱 Móvil: + (57) 318 777 00 32
📍 Dirección: Cra 19C # 9b - 20 Br. Ichagua



NEIVA (HUILA)

☎ Teléfono: + 57 (8) 871 68 51
📱 Móvil: + (57) 316 471 93 00
📍 Dirección: Calle 21 # 5bis - 21
Oficina. 303 Edif. La Ceiba



E-mail: info@promed.com.co

Distribuido por

[www](http://www.promed.com.co) PROMED.COM.CO

Produced by

ChM[®]

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Koscielny
Poland
www.chm.eu