

ChM[®]

SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA

Promed
Quirúrgicos



5,0 ChM Locked Plating
ChLP system

Sistema diseñado con 3 diferentes opciones de curvaturas para la artrodesis de muñeca en casos de artrosis postraumática, deformidades reumatoideas, inestabilidades articulares complejas.



Punta en forma de bisel para facilitar la inserción de la placa en abordajes MIPO

Orificios que posibilitan realizar compresión bidireccional

Fijación con tornillos de cabezas bajo perfil (2.4/2.7mm) que evitan la irritación de los tejidos blandos.



Superficie de bajo contacto que preserva la perfusión sanguínea del periostio.

Bajo perfil optimizado, con bordes redondeados que disminuyen la irritación de los tejidos y la prominencia del implante en el dorso de la mano.




Orificios para la estabilización preliminar de la placa con clavos de Kirschner que favorece la fijación definitiva de la misma.

3 Tipos de curvatura (recta - corta - estándar) para la fijación de la muñeca de acuerdo a la anatomía de la misma.



ChM[®] Promed
Quirúrgicos

SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA

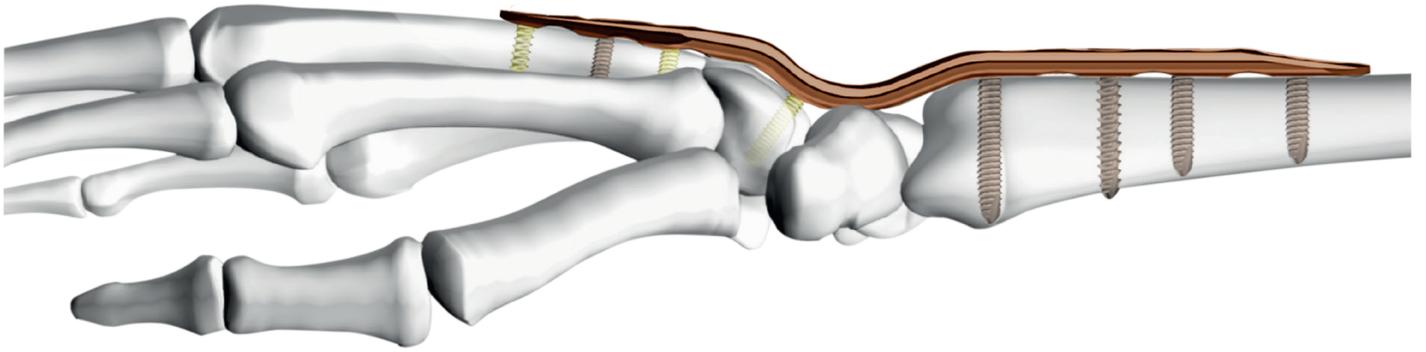

Len	Ti	PLACA RECTA
130	✓	



Len	Ti	PLACA CORTA
131	✓	



Len	Ti	PLACA STÁNDAR
130	✓	



	Ti						Co	VA
	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓			
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓					

- Cortical
- Bloqueado
- Torx Drive
- Longitud
- Diámetro
- Esponjoso
- Cobalto
- Aleación de Titanio
- Ángulo variable