

# Lateral Femur Nail

## Charfix System<sup>2</sup>




ChM<sup>®</sup>

# Indicaciones



Tipo de fracturas AO  
32-A/B/C • 32-A/B/C Y 31-B

Diferentes métodos de reconstrucción según el tipo de fractura:

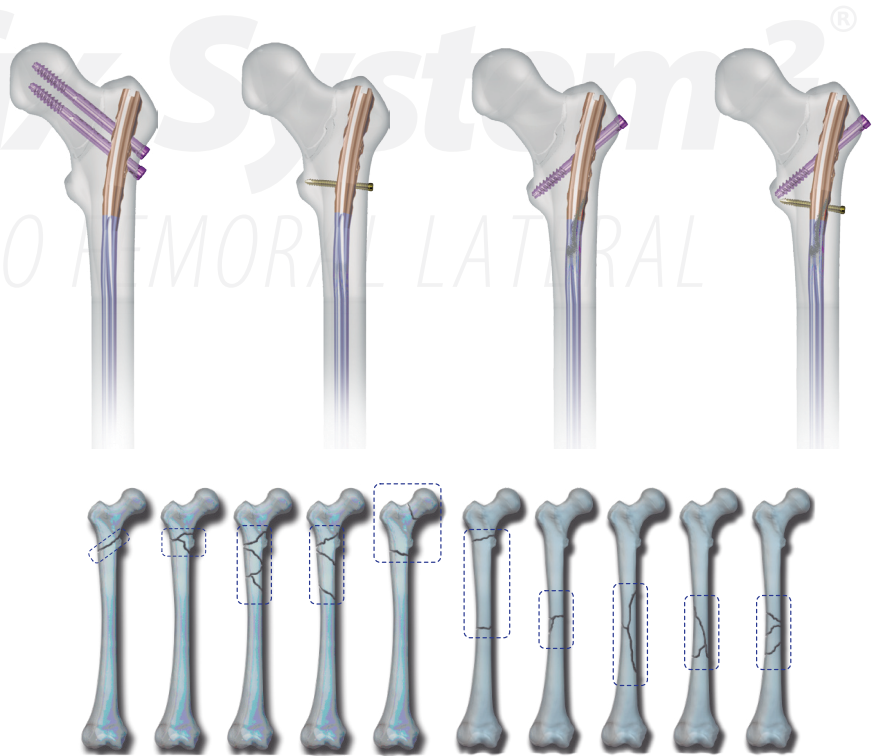

## Características del implante




- Material:** Aleación de titanio (Ti6Al7Nb)
- Diametro proximal:** 14 mm
- Diametro diafisiario:** 10 - 11 - 12 mm
- Longitud:** 340 hasta 420 mm (Derecho, Izquierdo)
- Tipo:** Canulado
- Inserción de implante:** Trocantérico Lateral


• Diseño anatómico del implante

### 2 Curvaturas espiroideas:

- **En la parte distal** – Acorde al radio de curvatura natural del fémur
- **En la parte proximal** – Inserción espiroidea
- Facilita la inserción y extracción del implante
- Abordaje quirúrgico **MISS** que facilita la reconstrucción de alta complejidad
- Opciones de bloqueo proximal y distal de tipo reconstructivo (Principio de fijador interno)
- Guía de bloqueo distal externa que facilita los bloqueos

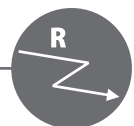


# Características del Sistema

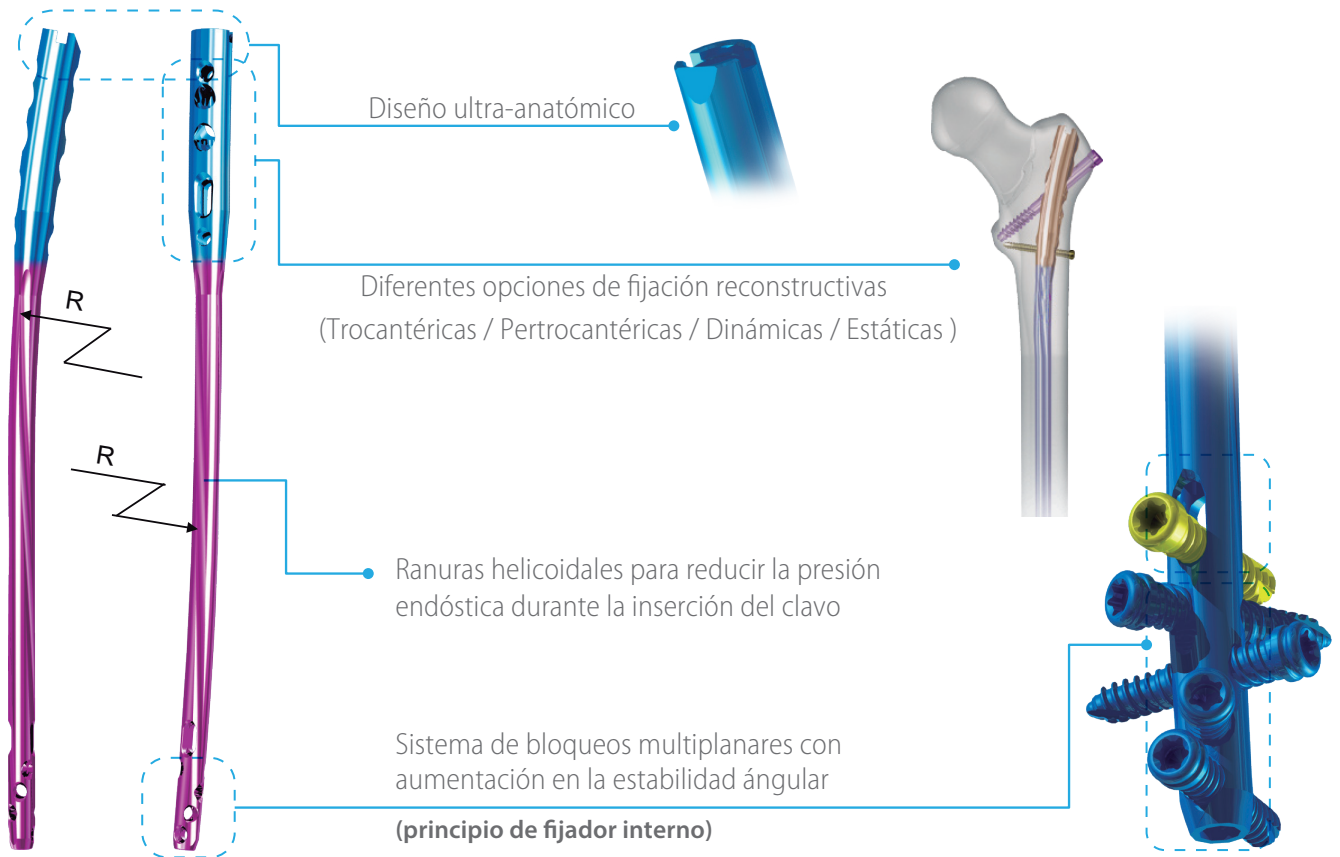


Conserva la anteversión anatómica del cuello femoral (10°)

## LATERAL

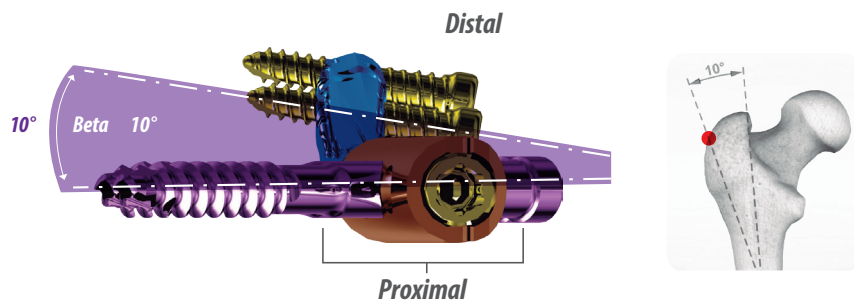

## UNIVERSAL

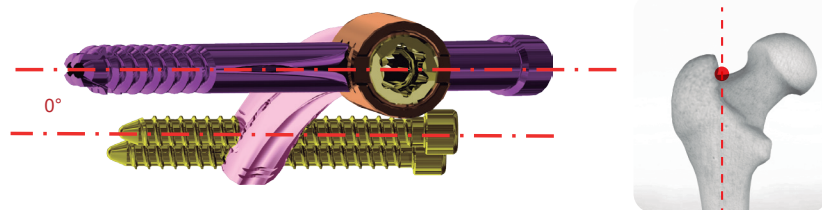

CHARFIX system

0° Anteversión

## Lateral Femur Nail Charfix System<sup>2</sup>



### BOGOTÁ D.C

☎ Teléfono: +57 (1) 221 45 99  
 📞 Móvil: + (57) 315 300 72 94  
 📍 Almacén: + (57) 316 442 25 81  
 📍 Dirección: Cra 67 # 43 - 17 Br. Salitre Greco



### IBAGUÉ (TOLIMA)

📞 Móvil: + (57) 317 403 59 97  
 📍 Dirección: Calle 51 #7b - 17  
 Br. Limonar 5 sector



### BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)

☎ Teléfono: + 57 (5) 312 51 93  
 📞 Móvil: + (57) 318 593 21 64  
 📍 Dirección: Cra 44 No. 84 - 91 Br. Granadillo



### MEDELLIN (ANTIOQUIA)

📞 Móvil: + (57) 317 515 16 89  
 📍 Dirección: Calle 16 # 41 - 210 Oficina 105  
 Edif. La Compañía



### BUCARAMANGA (SANTANDER)

☎ Teléfono: + 57 (7) 696 09 71  
 📞 Móvil: + (57) 318 868 47 99  
 📍 Dirección: Cra 38 No. 34 - 79 Br. Las Américas



### VALLEDUPAR (CESAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 571 24 88  
 📞 Móvil: + (57) 318 777 00 32  
 📍 Dirección: Cra 19C # 9b - 20 Br. Ichagua



### CALI (VALLE DEL CAUCA)

☎ Teléfono: + 57 (2) 577 06 43 · + 57 (2) 373 24 24  
 📞 Móvil: + (57) 318 358 89 40  
 📍 Dirección: Cra 38 # 5b5 - 89 Br. San Fernando



### NEIVA (HUILA)

☎ Teléfono: + 57 (8) 871 68 51  
 📞 Móvil: + (57) 316 471 93 00  
 📍 Dirección: Calle 21 # 5bis - 21  
 Oficina. 303 Edif. La Ceiba



### CARTAGENA (BOLIVAR)

☎ Teléfono: + 57 (5) 643 06 75  
 📞 Móvil: + (57) 317 423 21 48  
 📍 Dirección: Br. Contadora 1 - Casa 26

✉ E-mail: [info@promed.com.co](mailto:info@promed.com.co)

Produced by

Distribuido por

[www.PROMED.COM.CO](http://www.PROMED.COM.CO)

**ChM**<sup>®</sup>

Lewickie 3b  
 16-061 Juchnowiec Koscielny  
 Poland  
[www.chm.eu](http://www.chm.eu)