


VARR®

VOLAR VARIUS ANGLE RADIUS
RECONSTRUCTION

Sistema integral para reconstrucción de fracturas en el segmento distal del radio.

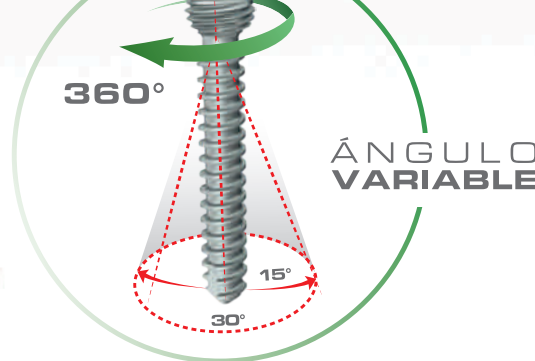


VARR

INDICACIONES

- Fracturas Simples / Complejas

EXTRA
PERI
INTRA

Articular

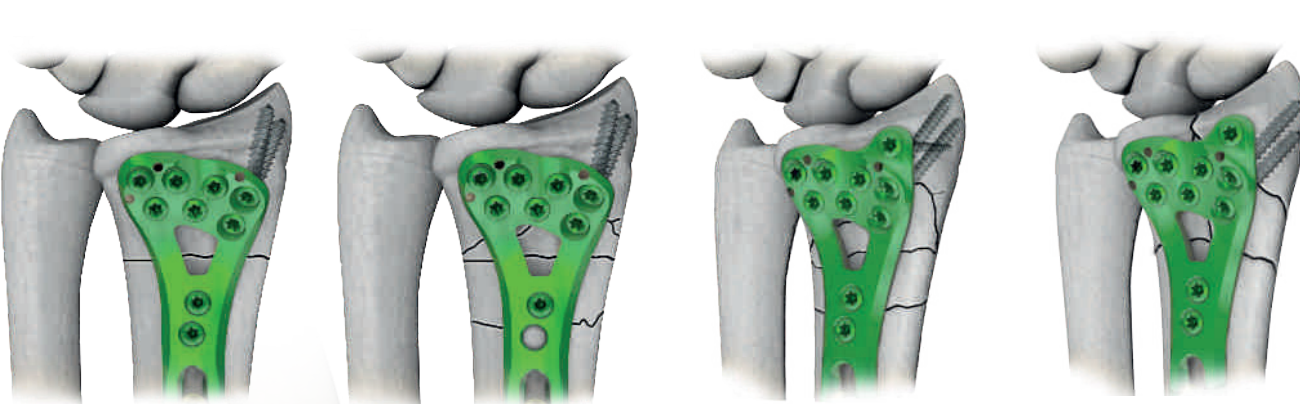

- Diseño anatómico ultra-perfilado, permite adaptación perfecta logrando una posición muy próxima al borde articular, idóneo para la reconstrucción de fracturas complejas, inclusive las multifragmentos.

- Reproducción anatómica en un arco profundo para disminuir la fricción con los tendones flexores.

VOLAR VARIUS ANGLE RADIUS
RECONSTRUCTION

VARR

DUO / BLOQUEO

Todas las opciones de tornillos en la rama distal pueden ser de fijación

Ángulo Fijo / Ángulo Variable

Opción de implante con extensión radial para fijación en trazos de fracturas altas o distales de la estiloides, brinda doble plano de estabilización angular.


Extensión estiloides



La opción de ángulo variable VA/CrCo brinda hasta 3 reposicionamientos con el mismo tornillo en el mismo orificio brindando una óptima estabilidad.

Dynamic tests were performed for 500,000 loading cycles


Dynamic test: standard vs. VA screw

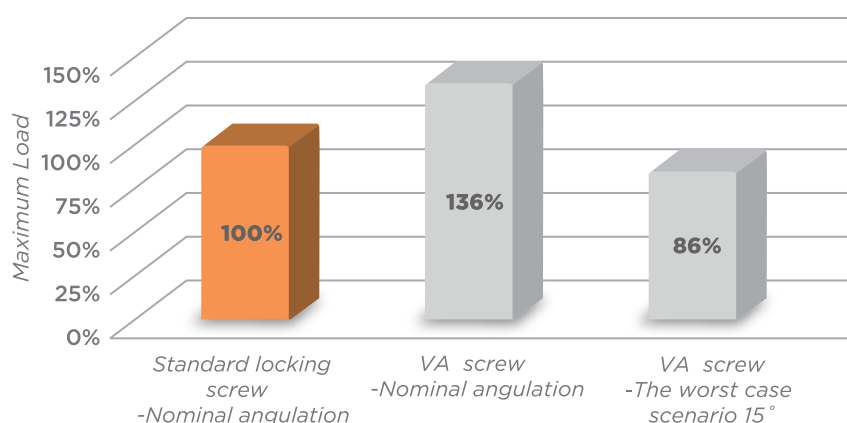


VOLAR VARIUS ANGLE RADIUS
RECONSTRUCTION

VARR

- Mecanismo de rescate para fragmentos dorsales no reducidos, permite recuperar dichos fragmentos logrando reducción y compresión interfragmentaria (Ø 2.2)

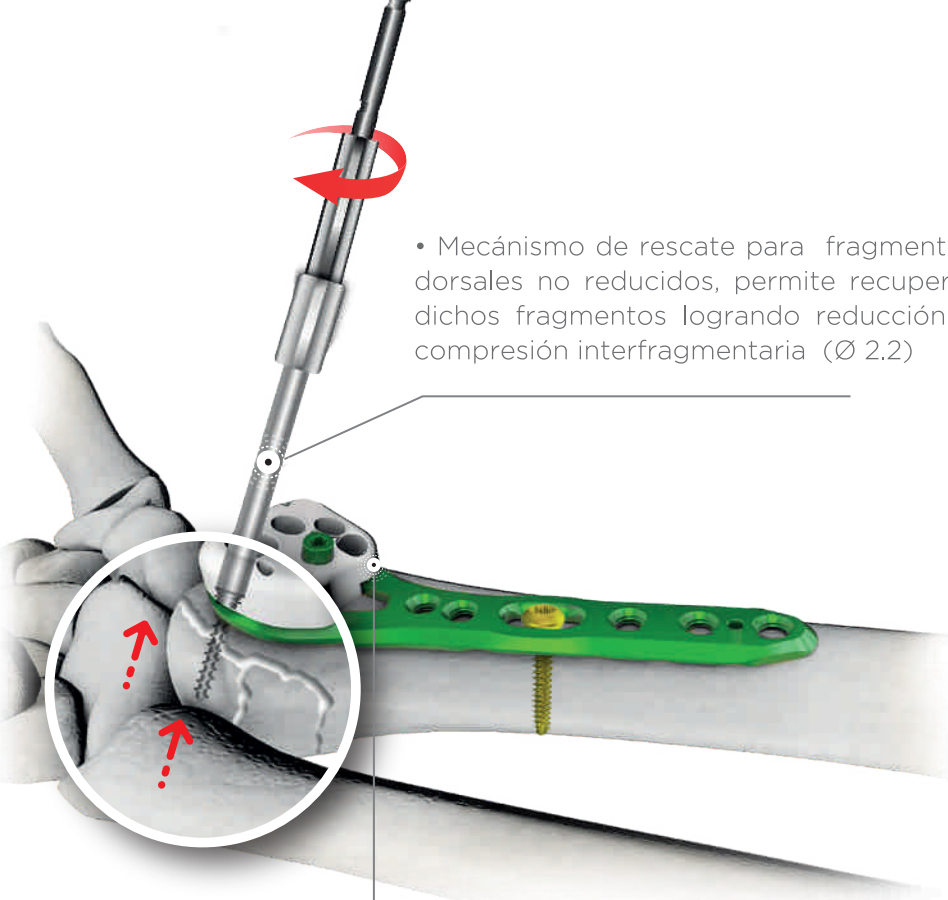

- Sistema plantilla guía en PEEK facilita la orientación de los orificios bloqueados en ángulo fijo.

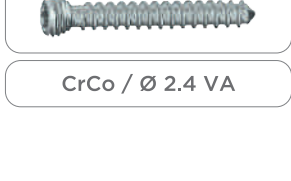

BOGOTÁ D.C.
 ☎ Teléfono: +57 (1) 443 36 75
 ☎ Móvil: +57 (313) 423 21 48
 ☎ Cra 67 # 43 - 17 Bc. Salitre Greco

MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
 ☎ Móvil: +57 (317) 515 16 89
 ☎ Calle 16 # 41 - 210 Oficina 105
 Edificio La Compania

CALI (VALLE DEL CAUCA)
 ☎ Teléfono: +57 (2) 577 06 43 - +57 (2) 373 24 24
 ☎ Móvil: +57 (318) 358 89 40
 ☎ Cra 38 # 505 - 89 Bc. San Fernando

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
 ☎ Teléfono: +57 (5) 312 51 93
 ☎ Móvil: +57 (318) 593 21 64
 ☎ Cra 44 No. 84 - 91 Bc. Granadillo

CARTAGENA (BOLÍVAR)
 ☎ Teléfono: +57 (3) 443 36 75
 ☎ Móvil: +57 (317) 423 21 48
 ☎ Bc. Contadores 1 - Casa 26

BUCARAMANGA (SANTANDER)
 ☎ Teléfono: +57 (5) 696 09 71
 ☎ Móvil: +57 (318) 686 47 99
 ☎ Cra 38 No. 34 - 79 Bc. Las Américas

BRAGUE (TOLIMA)
 ☎ Móvil: +57 (317) 403 99 97
 ☎ Calle 51 # 10 - 17
 Bc. Limonar 5 sector

VALLIDUPAR (CESAR)
 ☎ Teléfono: +57 (5) 371 24 88
 ☎ Móvil: +57 (318) 777 00 32
 ☎ Cra 19C # 96 - 20 Bc. Ichagua

NEIVA (HUILA)
 ☎ Teléfono: +57 (8) 871 68 51
 ☎ Móvil: +57 (316) 471 93 00
 ☎ Calle 21 # 505 - 21 Oficina 303 Edif. La Ceiba