

ADHARA

PEEK




Distribuido por:

PROMED
Latam



ANCLAJE DE PEEK

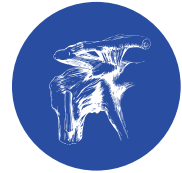

TENODESIS DEL BÍCEPS

Está especialmente diseñado para la fijación del Biceps

El implante ADHARA PEEK está diseñado para la tenodesis proximal del bíceps de tipo artroscópico completo o mini-open.

Este sistema reduce el tiempo quirúrgico gracias a su simplicidad y eficiencia.

El implante cuenta con un ojo único de PEEK que se utiliza para guiar el tendón del bíceps hasta el fondo de la perforación ósea sin necesidad de externalizar o realizar un whipstitch en el tendón.

No es necesario predefinir la longitud del tendón, ya que la posición y la tensión se pueden ajustar y visualizar fácilmente antes de la inserción final del anclaje.

DIÁMETRO


Ø 6.0 mm

Ø 7.0 mm



VENTAJAS DEL ADHARA PEEK

- Altas propiedades mecánicas
- Excelente biocompatibilidad
- Material químicamente inerte
- Radiolucido
- Módulo de elasticidad cercano al tejido óseo: transferencia de esfuerzo más homogénea y reducción de las concentraciones de esfuerzo

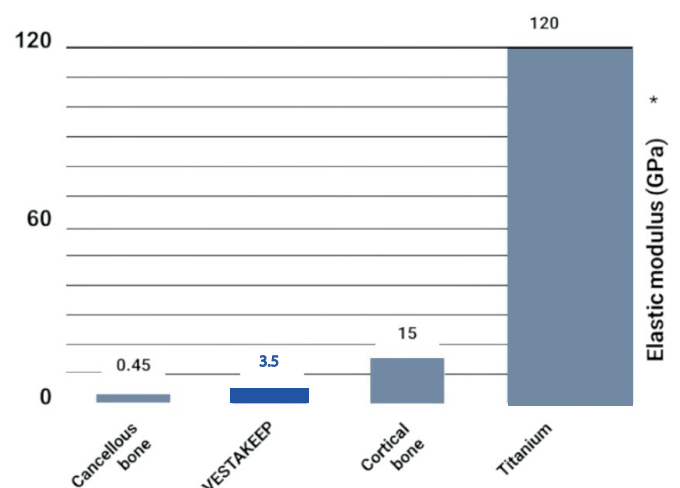

ADHARA PEEK

ALMACENAMIENTO

ADHARA PEEK deberá almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

ADHARA PEEK esta empacado en doble bolsa estéril a óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.

ADHARA PEEK debe utilizarse con el Punzon correspondiente.

IMPLANTE	TAMAÑO	REFERENCIA
ANCLAJE BIOTENODESIS ADHARA	Ø 6.0 mm	43-1102-290686
ANCLAJE BIOTENODESIS ADHARA	Ø 7.0 mm	43-1102-290787