



DRAKO
TITANIO



Distribuido por:

PROMED
Latam



ANCLAJE DE TITANIO

Está especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso


DRAKO TITANIO

Son anclajes completamente roscados que cuentan con un hilo de sutura UHMWPE (USP 2) y montado en un mango descartable para su fácil inserción y bloqueo en el hueso.

Estos anclajes están compuestos por aleación en titanio (Ti 6 Al 4 V)

VENTAJAS DEL TITANIO

- Altas propiedades mecánicas
- Resistente a la corrosión
- Mayor elasticidad que el acero inoxidable
- Biocompatible
- Radiolúcido

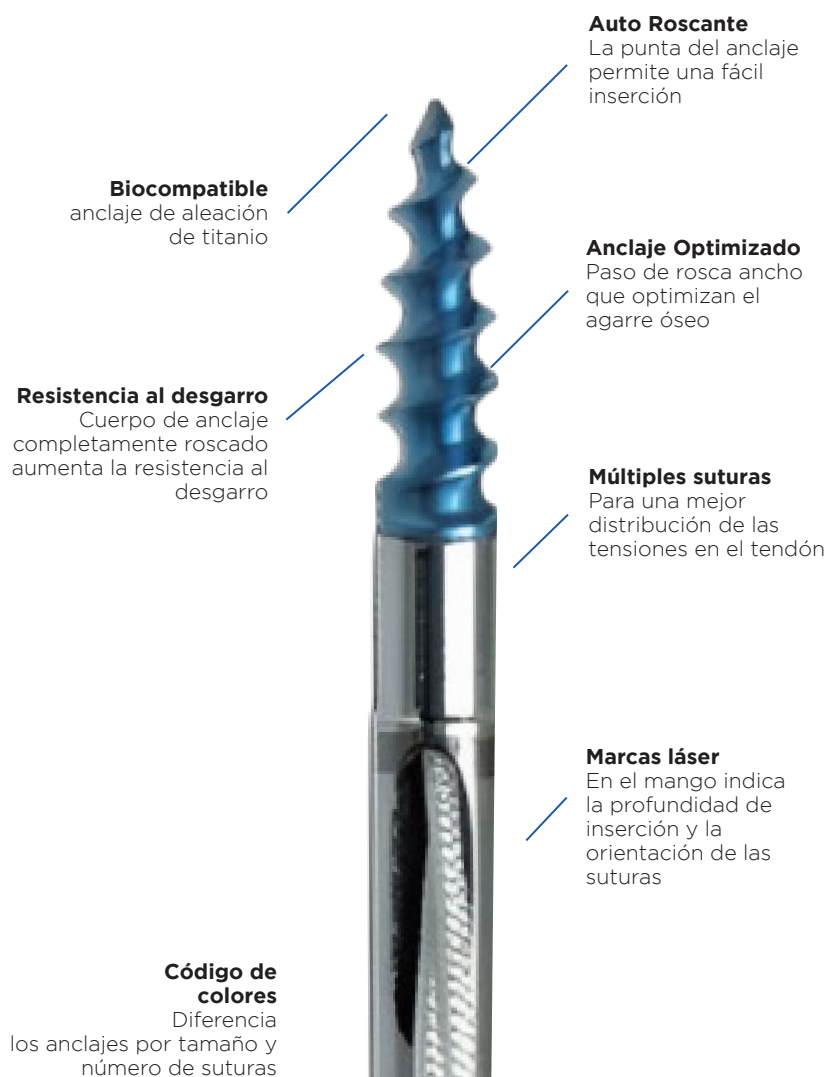

DRAKO TITANIO

DRAKO TITANIO El diseño del anclaje incorpora una rosca angular con un diámetro de núcleo muy pequeño para maximizar la resistencia de extracción en el hueso esponjoso u osteopénico.

Cada **DRAKO TITANIO** viene precargado con una sutura UHMWPE (USP 2) de diferentes colores para optimizar la fijación de tejidos blandos y permitir una mejor identificación

Ideal para la reparación artroscópica y cirugía mínimamente invasiva.

DRAKO TITANIO

DRAKO TITANIO MINI Ti Los anclajes de titanio están disponibles en diámetros de 2,8 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm y 5,0 mm. Están precargados con una sutura UHMWPE (USP 2).

En la mayoría de los casos, el anclaje se puede insertar manualmente porque es autoperforante.

Por su forma, este anclaje tiene una resistencia significativa a la extracción está disponible con agujas para aplicaciones de cirugía abierta en muchas indicaciones de reinserción de tendones o ligamentos



DIÁMETRO (mm)

Ø 2,8
mm

Ø 3,0
mm

Ø 3,5
mm

Ø 4,0
mm

Ø 5,0
mm



TOBILLO

VENTAJAS DE LAS SUTURAS

DRAKO TITANIO están precargados con 1 suturas USP2 (hechas de polietileno de muy alto peso molecular UHMWPE)

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN FÁCIL
REALIZACIÓN DE NUDOS RESISTENCIA Y
SEGURIDAD DE LAS SUTURAS



DRAKO

TITANIO

ALMACENAMIENTO

DRAKO TITANIO deberán almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

DRAKO TITANIO empacado en doble bolsa y estéril con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.
Instrumentación para cirugía artroscópica está disponible.

IMPLANTES	TAMAÑO	REFERENCIAS
ANCLAJE DRAKO TITANIO	Ø2,8mm	43-9903-712810
ANCLAJE MULTILIG TITANIO	Ø3,0mm	43-9903-406003
ANCLAJE DRAKO TITANIO	Ø3,5mm	43-9903-713514
ANCLAJE MULTILIG TITANIO	Ø4,0mm	43-9903-406004
ANCLAJE MULTILIG TITANIO	Ø5,0mm	43-9903-406005