




MIRACH
PEEK

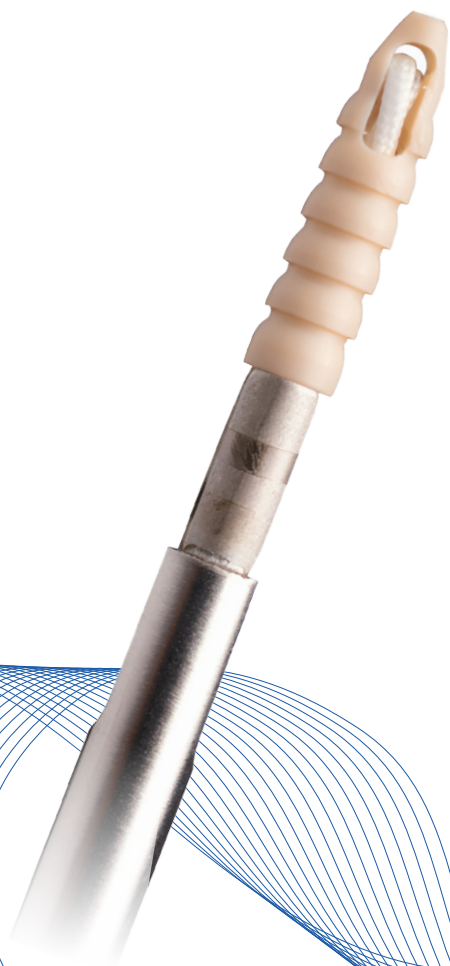

Distribuido por:

PROMED
Latam



ANCLAJE DE PEEK

Está especialmente diseñado para la fijación de tejidos blandos al hueso

MIRACH PEEK


Son anclajes para atornillar o impactar precargados con un hilo de sutura de UHMWPE (USP 2), en un mango descartable para su inserción y bloqueo en el hueso.

Estos anclajes están compuestos por un polímero termoplástico el PEEK polieteretercetona VESTAKEEP considerado como uno de los más exitosos del mundo con más de 15 años de experiencia clínica en ortopedia.



VENTAJAS DEL PEEK

- Altas propiedades mecánicas
- Excelente biocompatibilidad
- Material químicamente inerte
- Radiopaco
- Modulo de elasticidad similar al tejido óseo : reducción de zonas de tensión

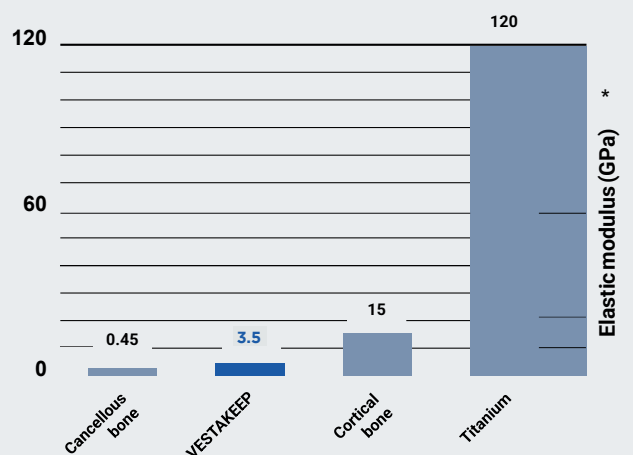

MIRACH PEEK

MIRACH PEEK Los anclajes de sutura están disponibles en muchas configuraciones varios tamaños, con una sutura, con o sin aguja o sin nudos. Presentan un ojal que proporciona una resistencia superior a la abrasión debido al bajo coeficiente de fricción de PEEK.

El uso de **MIRACH PEEK** implementa una técnica simple y reproducible utilizando una guía para la perforación y para la impactación del anclaje.



MANO

DIÁMETRO
(mm)

Ø 2,0
mm



MIRACH PEEK

ALMACENAMIENTO

MIRACH PEEK deberán almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

PRODUCTOS E INSTRUMENTACIÓN

MIRACH PEEK se envasa en doble bolsa y se esteriliza con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU. Instrumentación para cirugía artroscópica está disponible **MIRACH PEEK** debe utilizarse con el punzón iniciador correspondiente..

IMPLANTE	TAMAÑO	REFERENCIAS
MIRACH PEEK	Ø2,0mm	43-0702-692027