



SIRIUS

INSIDE - OUT




Distribuido por:



SIRIUS INSIDE - OUT

La sutura meniscal Sirius Inside-Out es un sistema diseñado específicamente para la técnica de reparación meniscal inside-out, proporcionando una solución eficiente y confiable para la fijación del tejido mediante abordajes artroscópicos. Está compuesta por una sutura 2-0 de ultra alta resistencia, equipada con agujas en ambos extremos de 250 mm de longitud, lo que permite un manejo preciso y adecuado a través de cánulas de artroscopia, optimizando la ejecución de esta técnica quirúrgica.

Su diseño técnico ofrece un deslizamiento suave durante la colocación, facilitando el paso de la sutura a través del tejido meniscal, mientras que su alta resistencia garantiza una fijación estable. Adicionalmente, su bajo perfil de nudos contribuye a una mejor adaptación del tejido reparado, favoreciendo resultados consistentes y reproducibles en la reparación meniscal mediante técnica inside-out.

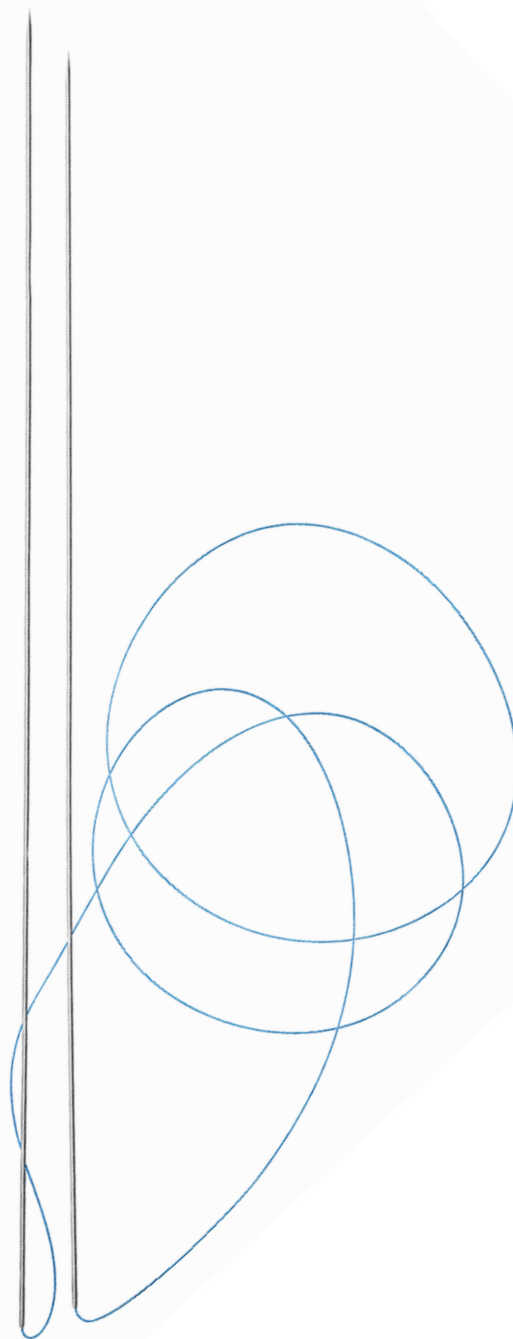

SIRIUS

INSIDE - OUT

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco por debajo de 30 °C (86 °F), lejos de la humedad y el calor directo.

Deséchelo si está abierto pero sin uso.

No usar después de la fecha de vencimiento.

PRODUCTO

SIRIUS INSIDE - OUT se envasa en doble bolsa y se esteriliza en óxido de etileno.

Solo de un solo uso. No vuelva a esterilizar.

IMPLANTE	REFERENCIA
SUTURA MENISCAL SIRIUS INSIDE - OUT	43-3521-191726