




SUTURA
ARTHROLINK

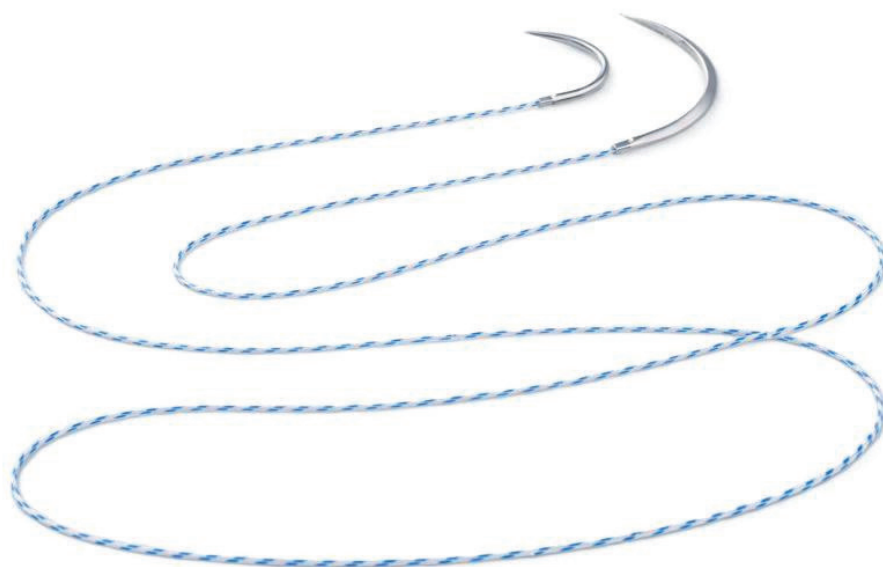

Distribuido por:

PROMED
Latam



SUPER SUTURA NO ABSORBIBLE

Refuerzo y reinserción de tendones y ligamentos.

Es una sutura estéril trenzada no absorbible preparada a partir de hilos de polietileno lineal de cadena larga (UHMWPE) de ultra alto peso molecular.

Está indicado para reparación o refuerzo de reinserción de ligamentos, tendones, reinserción de tuberosidades, aproximación y/o ligadura de tejidos blandos.



HOMBRO



CADERA




RODILLA



TOBILLO



MANO

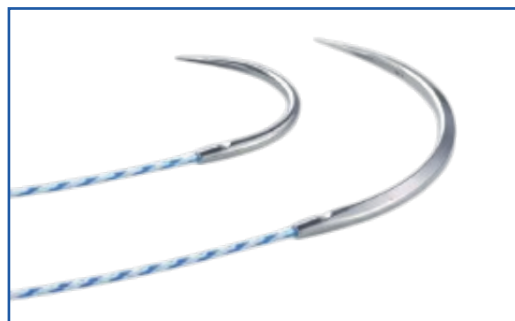

AGUJA DE SUTURA Sutura con doble aguja

Tipo:

Sutura USP2
Sutura USP5

Tamaño:


Longitud 90 cm

Colores

blanco/azul
blanco/negro blanco/verde.


Agujas:

Aguja Redonda de 1/ 2 circulo Longitud 26 mm (transtendinoso)
Aguja Cortante de 3/ 8 circulo longitud 40 mm (transóseo)

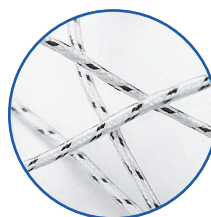


ESTRUCTURA DE FIBRA

La tecnología de núcleo de bloqueo proporciona un centro de la sutura para actuar como una columna vertebral para un mejor atado de nudos y características de manejo. Esta construcción trenzada única contribuye a su resistencia superior. Su diseño es flexible, suave para un mejor manejo.

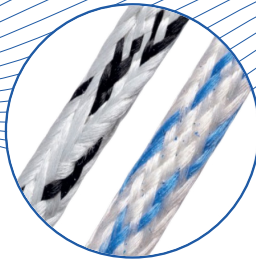

SUTURA TIPO TAPE O CINTA

IMPLANTE	LONG/ CINTA	ANCHO	LONG/ SUTURA	CALIBRE	AGUJAS
Sutura Tape Blanco/Negro	19cm	2,0mm	100cm	USP2	NO
Sutura Tape Blanco/Verde	60cm	1,6mm	100cm	USP2	NO

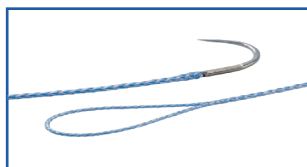


SUTURA LOOP

IMPLANTE	TIPO	LONG	AGUJAS	TIPO DE AGUJA
Sutura Loop Blanco/Azul	USP2	50cm	SI	Curva redonda de 1/2 circulo 48 mm


RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Ofrece excelentes propiedades mecánicas mucho más fuertes que el material de poliéster y líder del mercado. El trenzado permite un mejor manejo junto con una alta resistencia al nudo. Las suturas permanecen estables después de la implantación en vivo.

FUERZA TENSIL*

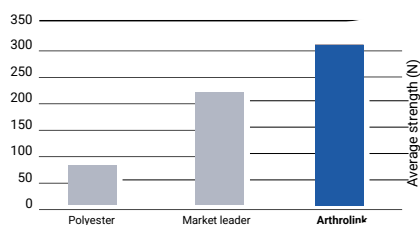

TRACCIÓN DE NUDOS

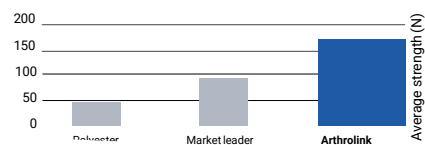

VENTAJAS DE LAS SUTURA

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
 DESLIZAMIENTO DE NUDOS
 SOLIDEZ Y SEGURIDAD DE LAS SUTURAS
 BIOCOMPATIBLE
 4 COLORES PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD

SUTURA

ARTHROLINK

ALMACENAMIENTO

SUPERSUTURA, TAPE, LOOP debe almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura.

PRODUCTOS

Listo para usar en una bolsa sellada y esterilizado por óxido de etileno.
De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.

DESCRIPCIÓN		COLOR	REFERENCIA
SUPERSUTURA	USP2	Blanco/Azul	43-9903-252002
	USP2	Blanco/Negro	43-9903-252004
	USP2	Blanco/Verde	43-9903-252003
SUTURA LOOP	USP2	Blanco/Verde	43-9903-272003
SUTURA TAPE	1,6mm	Blanco/Verde	43-9903-262003
	2,0mm	Blanco/Negro	43-9903-262004