


# TAYCAN

## PEEK



Distribuido por:

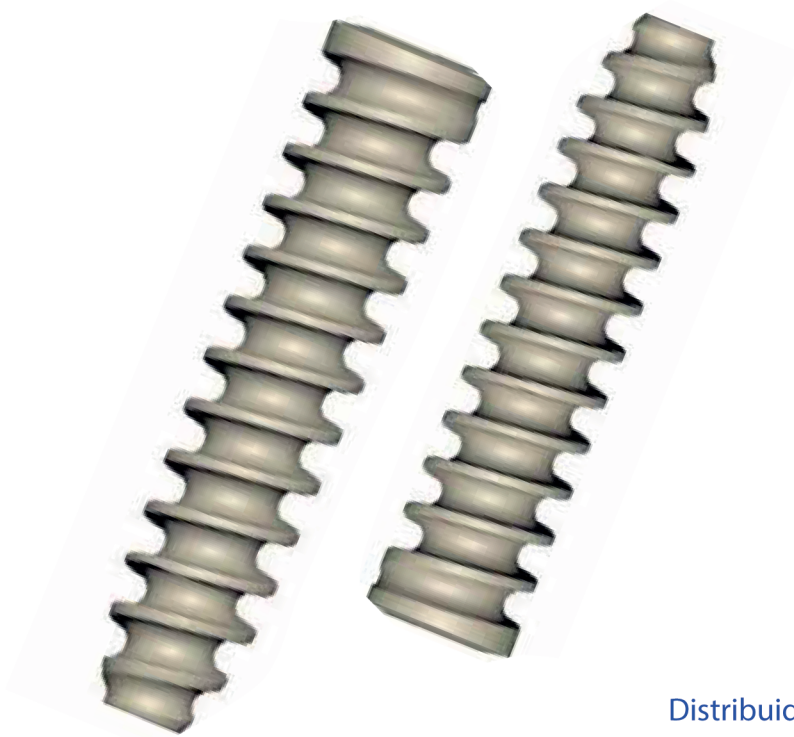

# TORNILLO DE INTERFERENCIA EN PEEK

## Reconstrucción de ligamentos

TAYCAN PEEK es un tornillo de interferencia fabricado en PEEK, especialmente diseñado para técnicas quirúrgicas de ligamentoplastia, como la reconstrucción de ligamentos cruzados anterior y posterior, así como otros procedimientos de estabilización articular.

TAYCAN PEEK ofrece una gama completa de tornillos que garantiza una fijación segura de los injertos.

TAYCAN PEEK es el implante ideal para las técnicas actuales de ligamentoplastia (injertos hueso tendón hueso o tejidos blandos en túneles femorales o tibiales).



RODILLA

- Biocompatibilidad: material inerte, sin riesgo de reacciones adversas.
- Radiotransparencia: no genera artefactos en resonancia magnética.
- Alta resistencia mecánica: comparable al metal, pero sin sus desventajas.
- Estabilidad dimensional: no se degrada ni pierde propiedades con el tiempo.

## Características destacadas del tornillo TAYCAN PEEK

- Diseño completamente roscado: asegura una fijación firme del injerto, ya sea de tejido blando o hueso-tendón-hueso (BTB).
- Bordes redondeados: minimizan el riesgo de laceración del injerto durante la inserción.
- Compatibilidad con RM: permite un seguimiento postoperatorio claro y sin interferencias.
- Amplio rango de tamaños: desde 7x25 mm hasta 11x35 mm, adaptándose a múltiples técnicas

## Aplicaciones clínicas

- Reconstrucción del LCA y LCP
- Procedimientos multiligamentarios y revisiones

## Ventajas frente a otras opciones

- No absorbible: mantiene su integridad estructural a largo plazo.
- Fácil inserción y extracción: ideal para cirugías primarias y de revisión.
- Reducción de dolor postoperatorio: gracias a su bajo perfil y mínima interferencia con tejidos blandos.

# TAYCAN PEEK

## ALMACENAMIENTO

TAYCAN PEEK deberán almacenarse en su embalaje original, sin abrir, en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente.

Para obtener más información, consulte la IFU.

## PRODUCTOS

TAYCAN PEEK se entrega doblemente embalados en una bolsa de aluminio y esterilizados por óxido de etileno.

De un solo uso. (No reesterilice).

DIAMETRO	LONGITUD	REFERENCIA
Ø7	25	43-3402-290725
	30	43-3402-290730
Ø8	25	43-3402-290825
	30	43-3402-290830
Ø9	25	43-3402-290925
	30	43-3402-290930
Ø10	30	43-3402-291030
Ø11	35	43-3402-291135

