


ANORECTAL PPH

GRAPADORA



Distributed by

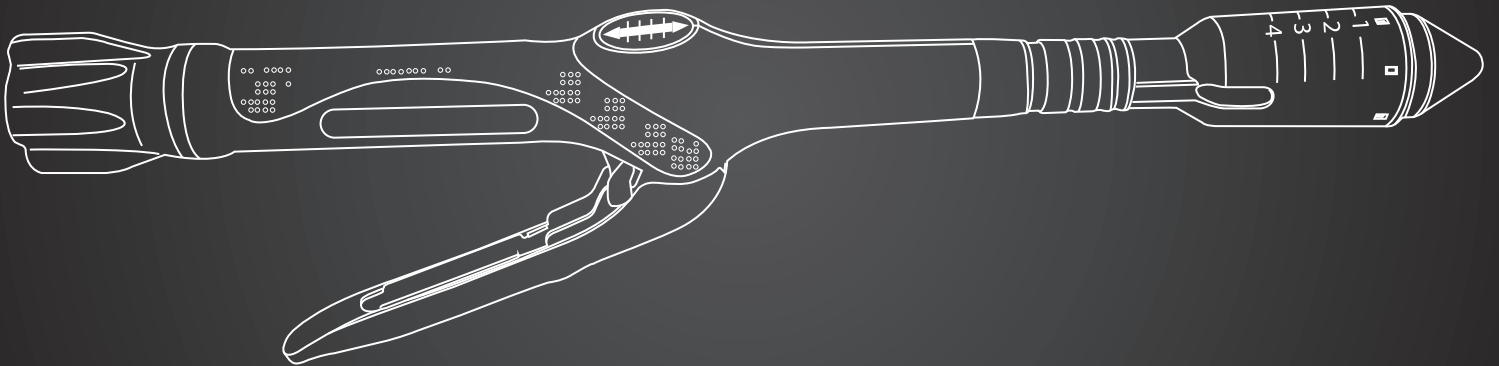


ANORECTAL PPH

GRAPADORA

Perilla de fácil ajuste

Seguridad de grapado

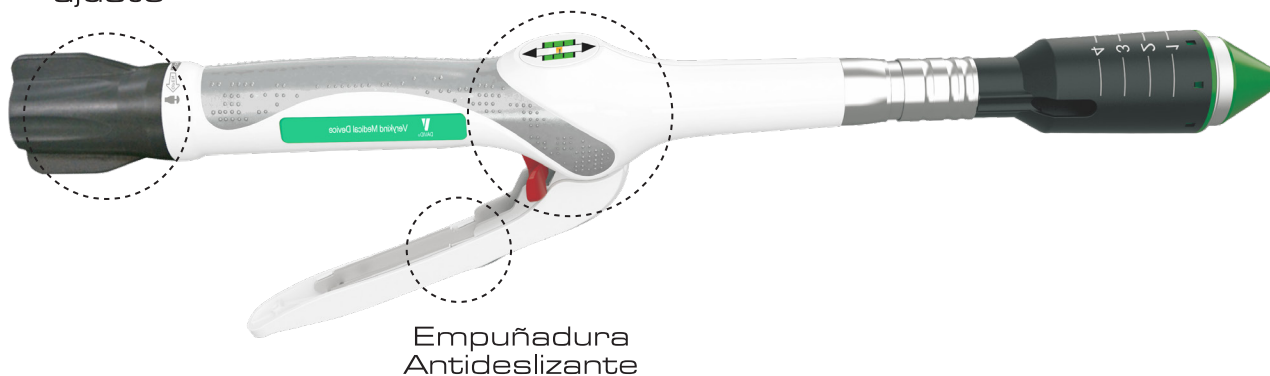

Empuñadura Antideslizante

► Modelo: PPH33
PPH34
PPH36

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



Volumen extra-large para mayor agarre de tejido



Diseño de grapa en 3D

- Altura de grapa abierta 4.0mm
- Altura de grapa cerrada 0.75mm - 1.5mm



Agarre ergonómico



Seguridad al disparar

PROMED
Laparoscopy

CE⁰¹⁹⁷ FDA ISO
13485



Accesorios de resección circunferencial.



Accesorios de resección seleccionables.



La sonda del brazo en C permite el tratamiento de hemorroides para masas más grandes, evitando problemas graves de estenosis en PPH.

APLICACIÓN

- Las grapas 3D de aleación de titanio proporcionan una resistencia superior para prevenir la fistula anastomótica.
- Un yunque de diseño compacto reduce la tensión en el sitio anastomótico durante la extracción.
- Dos filas escalonadas de grapas permiten una buena anastomosis y sellado hemostático.
- Al grapar en el rango verde se obtiene una altura de grapa cerrada adecuada para el grosor del tejido comprimido.
- Volumen extragrande de cartucho para una mayor incorporación del tejido.
- La variedad de tamaños proporciona más opciones para los requisitos anatómicos individuales del paciente.
- La empuñadura antideslizante proporciona una mayor comodidad y control.
- Retroalimentación audible y visible para recordar mejor a los cirujanos acerca de la finalización del grapado.

MODELO	DIÁMETRO	RANGO DE COLOR	CANT. GRAPA	Ø ANASTOMOSIS
PPH33	33	Verde	32	33.4
PPH34	34	Azul	32	33.6
PPH36	36	Blanco	34	35.7