

BELLATRIX TITANIO



Distribuido por:

PROMED
Latam



ANCLAJE DE TITANIO

BELLATRIX TITANIO

Son anclajes completamente roscados que cuentan con dos hilos de sutura UHMWPE (USP 2 y montados en un mango descartable para su fácil inserción y bloqueo en el hueso.

Estos anclajes están compuestos por aleación en titanio (Ti 6 Al 4 V)



MANGUITO ROTADOR

VENTAJAS DEL TITANIO

- Altas propiedades mecánicas
- Resistente a la corrosión
- Mayor elasticidad que el acero inoxidable
- Biocompatible
- Radiolúcido

Biocompatible
anclaje de aleación de titanio

Resistencia al desgarro
Cuerpo de anclaje completamente roscado aumenta la resistencia al desgarro

Tamaño
Disponible en diámetros de 5.0mm con agujas

Auto Roscante
La punta del anclaje permite una fácil inserción

Anclaje Optimizado
Paso de rosca ancho que optimizan el agarre óseo

Múltiples suturas
Para una mejor distribución de las tensiones en el tendón

Marcas láser
En el mango indica la profundidad de inserción y la orientación de las suturas



DIÁMETRO

Ø 5.0
mm




BELLATRIX TITANIO

En su diseño el anclaje incorpora una rosca angular con un diámetro de núcleo muy pequeño para maximizar la resistencia de extracción en el hueso esponjoso u osteopénico.

Cada BELLATRIX TITANIO viene precargado con dos suturas de UHMWPE (USP 2) atigradas de diferentes colores para optimizar la fijación de tejidos blandos y permitir una mejor identificación.

Ideal para la reparación artroscópica y/o mini open del manguito rotador.

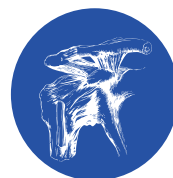

MANGUITO ROTADOR



VENTAJAS DE LAS SUTURAS

BELLATRIX TITANIO están precargados con 2 suturas USP2 (hechas de polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE).

Alta resistencia a la tracción.

Facil realizacion de nudos.

BELLATRIX TITANIO

ALMACENAMIENTO

BELLATRIX TITANIO deberá almacenarse en su embalaje original sin abrir, en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

BELLATRIX TITANIO esta empacado en doble bolsa y estéril con óxido de etileno. De un solo uso. No vuelva a esterilizar.

Para obtener más información, consulte la IFU.

IMPLANTE	TAMAÑO	REFERENCIA
ANCLAJE BELLATRIX TITANIO	Ø 5.0 mm	43-1103-175022